


UTILISATION DU RESPICLICK®



Médicament : _____
 Indication (entretien ou secours ou entretien+secours) : _____
 Nombre d'inhalation : _____ Nombre de fois par jour : _____
 Autres informations : _____

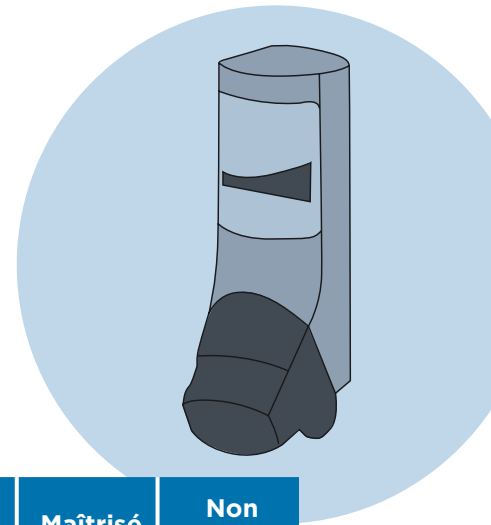

		Maîtrisé	Non maîtrisé
1	Retirer le dispositif de l'emballage d'aluminium au moment de l'utilisation : a. Le dispositif est prêt à l'emploi		
2	Le capuchon coloré fermé, placer le dispositif à la verticale		
3	Ouvrir complètement le capuchon jusqu'au déclic a. La dose est prête à être inhalée		
4	Garder le dispositif en position verticale		
5	Expirer normalement à côté du dispositif en vidant les poumons sans forcer		
6	Placer l'embout dans la bouche (entre les lèvres et les dents)		
7	Inspirer par la bouche rapidement et profondément : a. Attention de ne pas obstruer l'évent		
8	Éloigner le dispositif de la bouche		
9	Respecter un temps de pause: retenir la respiration 5 à 10 secondes		
10	Expirer par le nez		
11	Fermer le capuchon à sa position initiale		

REMARQUES

Afin de limiter les effets indésirables de la médication, se rincer la bouche avec de l'eau (ne pas avaler l'eau).

ENTRETIEN : _____

COMMENT SAVOIR S'IL EST VIDE : _____



RQESR

RÉSEAU QUÉBÉCOIS D'ÉDUCATION
EN SANTÉ RESPIRATOIRE
La référence des professionnels